


HB-H1

扉の前に、ベッド横に、そっと置くだけ。



置くだけポール君

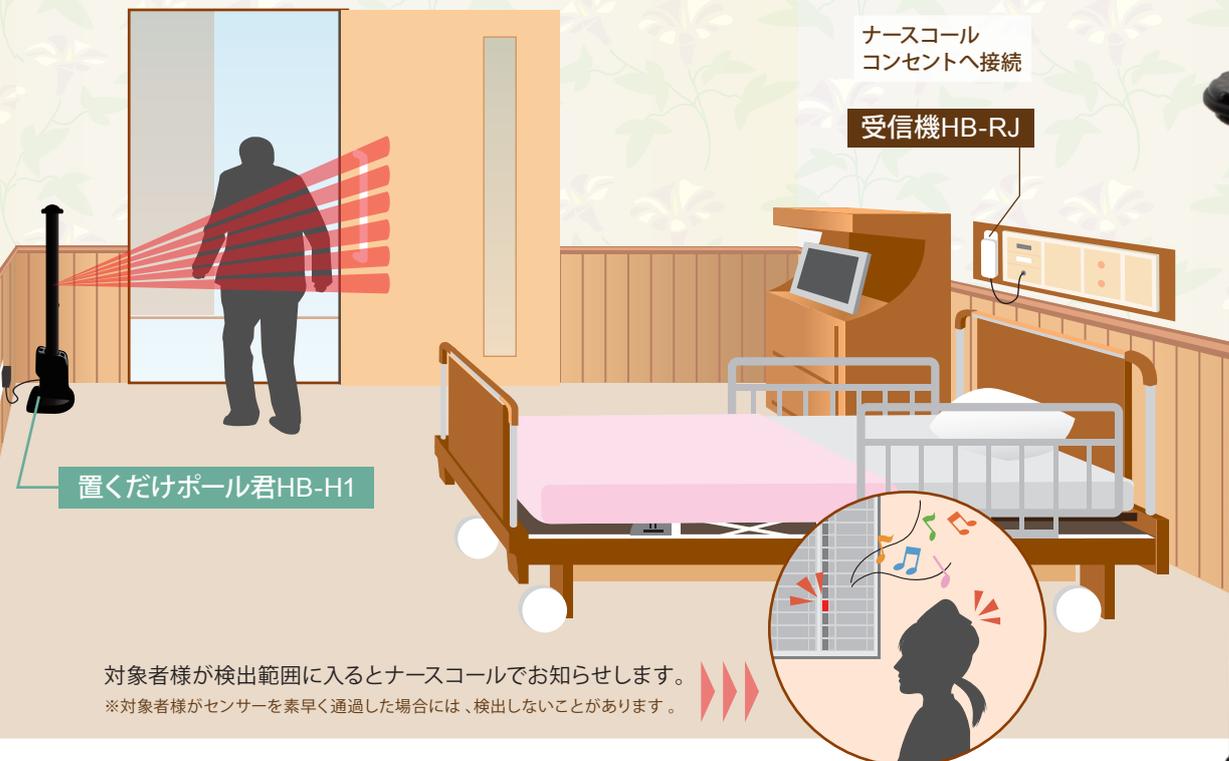

対象者が検出範囲に入るとナースコールでお知らせします。

※対象者がセンサーを素早く通過した場合には、検出しないことがあります。



従来センサーの課題

マットセンサーの課題



対象者が避けようとするため、かえって転倒のリスクが高まってしまう。

赤外線センサーの課題



検出範囲の設定、設置、操作が難しい。

「置くだけポール君」なら…



- 電源を差して検出したい場所に置くだけで設置完了!
- 検知範囲が目に見えないので対象者様に気づかれにくいです。
- 操作するスイッチも2つだけのシンプルな仕上がり。



わかりやすいLED表示




出力ON時 ※1 検出時 検出範囲確認 ※2

※1 出力スイッチONの直後は青色が5秒間点滅
※2 出力OFF時でも検出範囲を確認可能

安全性の向上

自動ドアセンサーで培った技術を活かした赤外反射方式の離床センサー。検出範囲が見えないので対象者に気づかれにくく、センサーを外そうとしたり飛び越えようとする危険を減らします。

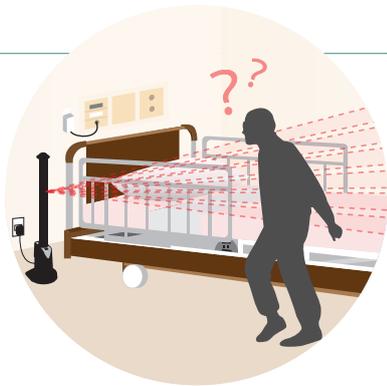

簡単な操作

置くだけポール君はその名の通り置くだけで設置完了です。操作するスイッチも2つだけのシンプル設計。



非接触で衛生的

操作スイッチは床から20cmの高さにあるため、汚れにくく、持ち手とベース部が抗菌仕様になっているため、衛生面でも安心です。




環境対策機能搭載

カーテンの揺れや布団のはみ出しはホトロン独自の技術により、検出されにくくなっています。(人以外での誤報を低減)




機器構成図

無線タイプをご利用の場合

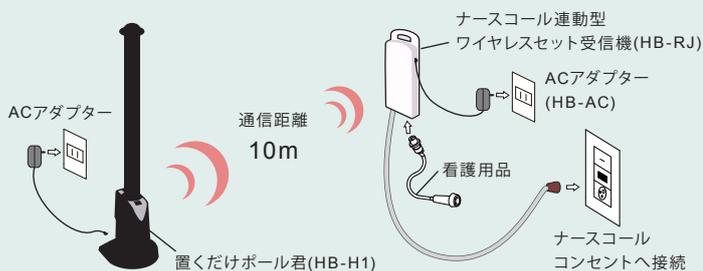

有線タイプをご利用の場合

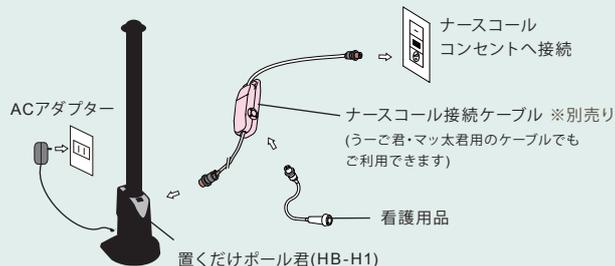

仕様

	品名/型番	置くだけポール君 / HB-H1 NEW	¥59,800 (税抜)
	検出距離	1.5m/2.0m (距離設定スイッチにより切換え)	
	サイズ	760mm×180mm×180mm	
	検出方式	赤外反射方式の測距による完全静止	
	電源	AC100V 50 / 60Hz(専用アダプタ使用)	

※ワイヤレス送信機内蔵・ACアダプター付属

	型名(受信機)	HB-RJ	¥35,000 (税抜)
	電源(受信機)	AC100V 50 / 60Hz(専用アダプタ使用)	
	電波到達距離	約10m(見通し距離)	
	周波数	315MHz帯	

まずはデモ機をお試しください

※貸出期間は2週間になります。

※お買い求めいただく場合の販売店経由となります。